

安全标签系统®



系统管理工具软件 (AT)



CODONICS

安全标签系统®

系统管理工具软件 (AT)


简介

在每个备药区域实现药房水平的监督和合规从未如此简单过。科多尼克安全标签系统 (SLS) 护理站 (PCS) 在每个需要备药的地方, 利用整合的处方药品数据库来提高病人用药的安全性和药品标签的合规性。这一数据库通过使用SLS系统管理工具软件 (AT) 来创建, 是一个系统管理软件。它使药房能够便捷地创建并控制药物处方, 包括医院批准的药品、药物浓度、使用规范, 可以将药房的影响范围扩展到备药的区域。通过AT医院药房可以:

- 快速便捷地创建一个药物处方, 包含医院批准的药品, 并结合医院的政策以及国际联合委员会 (JCI) 的要求, 美国麻醉师协会 (ASA) 和ISO体系关于药品标签的指南
- 控制药物处方、配置、SLS用户包和对所有SLS PCS的软件更新的发布
- 在每一台SLS PCS上加载医院批准的、自定义的药物处方, 这样, 临床医生可以在准备使用时便于安全的验证、识别和确认用药, 来提高病人的安全性, 减少用药错误
- 减少为了合规而花费在人工文档记录工作上的时间

SLS 系统中包含了为期一年的对Lexicomp™基本药品数据库的订阅。用户可以导入Lexicomp 数据库、用户自己的数据库, 或者是手动添加药品来完成MDD主药品数据库的药品记录的添加。

AT允许药房安全可靠地创建并控制为SLS所用的处方药物表, 该产品可以使临床药剂师成为围术期团队的一员。

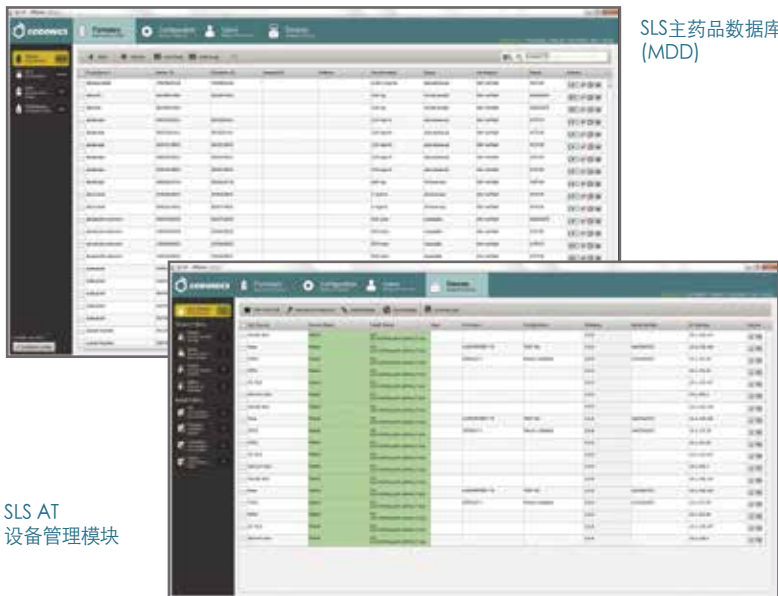

SLS主药品数据库 (MDD)

SLS AT 设备管理模块



AT服务器推荐配置要求

处理器: Xeon W-2135 @ 3.70GHz, 酷睿i7-7700 @ 3.60GHz或更快
内存: 8GB的应用空间
应用程序磁盘空间: 安装时总共需要30 GB的空间

AT客户端推荐配置要求

浏览器支持: Edge, Chrome
屏幕分辨率: 最低1440 x 900;使用浏览器默认字体
计算机操作系统: Windows®10或更新版本
应用程序: Excel®2003或更高版本以便打开报告

SLS 工作流程

通过有线或无线网络准备药物时, 可以创建多个药物处方和更新, 并推送给每台SLS PCS。每台SLS PCS通过AT与药房进行通信, 报告其状态和需要注意的事件。



要想获得更多信息, 拨打科多尼克的电话
021-62787701或访问 www.codonics.cn

**ISMP药物安全警告! 2015年急诊护理版和APSF时事通讯。2010;25(1):1,3-8 所有注册的和未注册的商标都属于各自所有者, 本公司有权修改产品的参数表, 恕不另行通知。
专利: www.codonics.com/ip/patents 版权所有 © 2010-2023, Codonics Inc. 4/2023.



捐赠赞助商



合作伙伴



CODONICS

We bring the future into focus

上海市长宁区仙霞路317号远东
国际大厦B栋1412室, 邮编
200051

电话: 021-62787701

传真: 021-62787719

邮箱: info@codonics.com

网站: www.codonics.cn

900-552-004.03