

DirectVista®

纸盒附加外部坡道 标签

产品公告 #16


背景

为提升 Horizon 医用图像打印机的介质处理性能，外部坡道标签已被添加到 DirectVista 纸盒中，该标签已被证实可通过印刷前积极引导介质来提升 DirectVista 纸盒的介质处理能力。

安装和使用

该墨盒与其他的 Horizon 墨盒安装与使用方法相同。按照用户手册中所述，请从盒中移除收缩包装和泡沫垫片，并将其插入 Horizon。**请勿移除标签。**当标签通过选胎时可能会有轻微的响声，这是正常现象，不会损坏仪器。

外部坡道标签指引

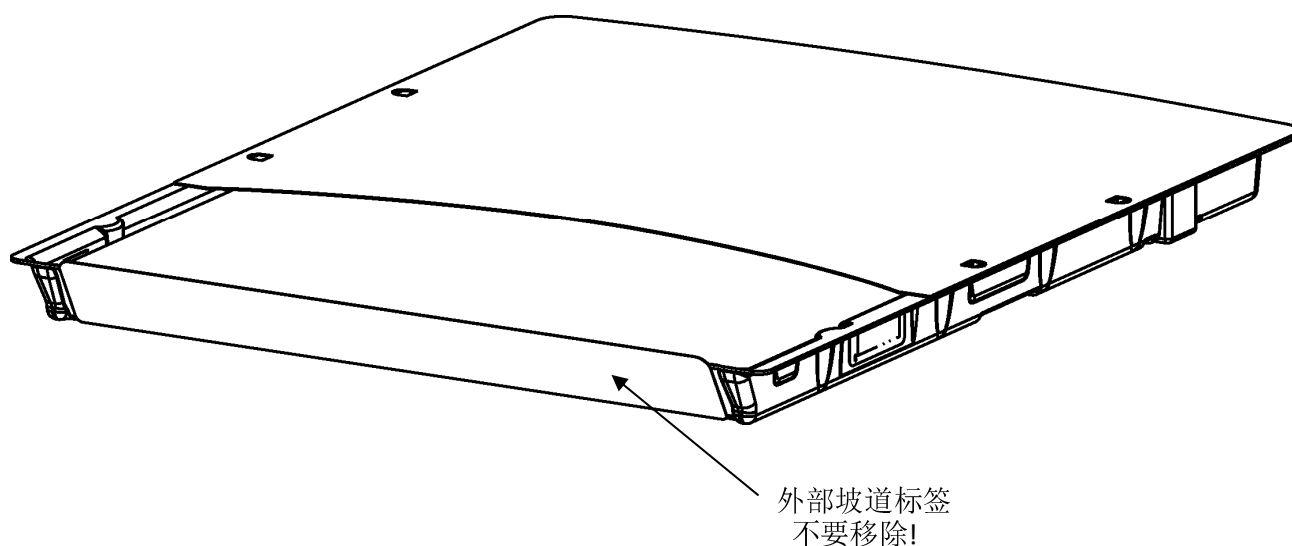

所有支持，只需一个电话：

800-820-8635

所有注册和未注册的商标均为其各自所有者的财产。规格如有变更，恕不另行通知。专利申请中。

版权所有 © 2016 Codonics, Inc. 在美国印刷。部件号 903-405-001.01



17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130
USA
+1.440.243.1198
+1.440.243.1334 Fax Email
info@codonics.com
www.codonics.com

科多尼克（上海）有限公司
中国上海市长宁区仙霞路317
号远东国际大厦1412室
邮编：200051
电话：+86.21.62787701
传真：+86.21.62787719