

Codonics Kiosk-F

多功能自助取片机



科多尼克

Codonics Kiosk-F

多功能自助取片机

简介

由美国科多尼克研发、设计的多功能自助打印终端，能够全面替代并提升医院放射科传统的人工分类整理胶片和诊断报告的工作模式。患者可以使用IC医保卡、条形码、磁条卡等各类就诊卡自助取得影像诊断报告和胶片。自助打印终端的设计是全智能模式，操作简单便于患者使用，并解决了患者排队取片等候时间长的问题，从而提高医院的工作效率。

系统特点

- 不改变医院现有胶片/报告打印流程，只需将打印机指向中央打印服务器。
- 具备信息自动识别匹配病人报告和胶片，极大降低人工操作工作量。
- 系统里多个终端取片，操作简便方便，报告和胶片从同一取片口获取。
- 自助打印终端配备24小时监控设备，提高安全保障能力。
- 易于服务，基本维护功能可以直接从正面接口完成。

技术规格

自助取片机基本配置及技术参数

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| 显示器: | 19" 液晶显示器 |
| 亮度: | >=300cd/m ² |
| 对比度: | 2000:1 (动态) |
| 触摸屏: | 19" 红外屏 |
| 感应时间: | <16ms |
| 透光率: | >92% |
| 控制主机: | 内置式高性能终端主机, 4G内存, 128G固态硬盘 |
| 报告打印机: | 黑白激光打印机 |
| 输入设备: | 条形码扫描平台; 医保卡读卡器 (选配) 二代身份证扫描仪 (选配) |
| OCR识别率: | 可以高达99% |
| 体积 (宽 × 长 × 高): | 70 x 77 x 172cm |
| 重量: | 122kg |

相机参数

基本配置不包括胶片相机，Horizon G1/G2/GS/Ci需要另配。

Horizon G1 配置

单槽，支持胶片、白基胶片

Horizon G2 配置

双槽，支持胶片、白基胶片

Horizon GS 配置


三槽，支持胶片、白基胶片

Horizon Ci 配置

三槽，支持胶片、白基胶片、彩色白基胶片

叫号软件 (选配, 不含显示器和接线)

与医院系统集成后，本系统还可提供自动叫号，在大屏幕上滚动列出已经完成报告可以取片的病人名字，以提示病人及时取报告和胶片。

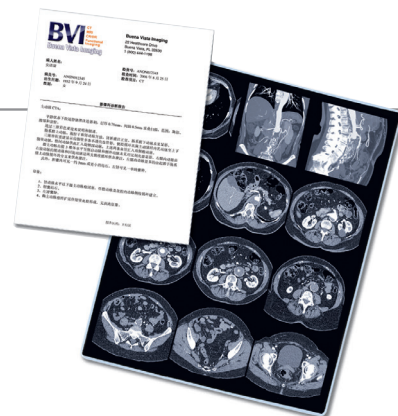

自动打印放射报告及胶片

1. 扫描就诊条形码



或者插入磁卡、IC卡、RFID卡

2. 等待打印



3. 取诊断报告和胶片



地址: 上海市长宁区仙霞路317号
远东国际大厦B栋1412室
邮编: 200051
电话: +86 13918872504
电邮: info@codonics.com
网站: www.codonics.com.cn
服务热线: 800-820-8635



请速与我们联系, 或访问我们的网站 www.codonics.com.cn

