


ChromaVista® 彩色白基胶片

随着当前越来越多的医疗系统在使用彩色应用程序，科多尼克的ChromaVista 彩色白基胶片成为理想选择。



“我们曾和一家神经学小组一起工作过，当他们看到我们怎样将胶片上清晰的彩色图像轻松地夹入病例记录中时，非常激动。彩色白基胶片简直改变了他们的做事方法。”


John C. Litchney, MBA, RT,
克利夫兰诊所区域放射科科长

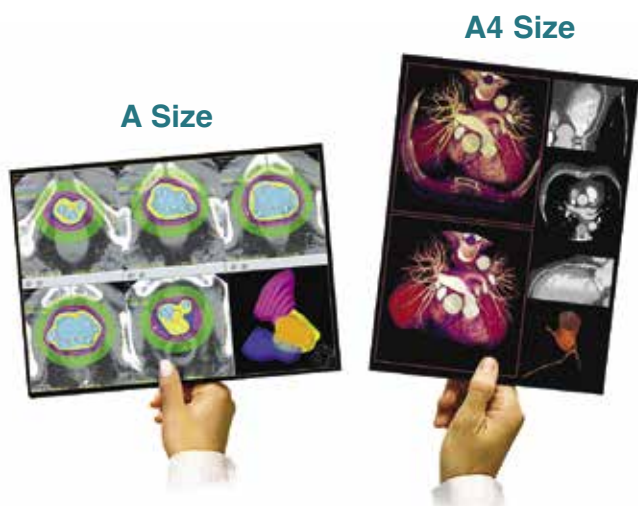

- 科多尼克专有的医学色彩匹配技术 (MCM™) 保证打印输出与医用显示器相一致。
- 无需灯箱，便于临床医生使用和患者携带。
- 专为医学应用设计，科多尼克彩色白基胶片经 FDA 批准，并可以归档保存。
- 每个像素1670万色的连续全色调成像技术，图像质量远高于普通纸质激光和喷墨打印机的成像质量。
- 是医疗行业能与常规彩色照相胶片相媲美的彩色打印。



ChromaVista® 彩色白基胶片

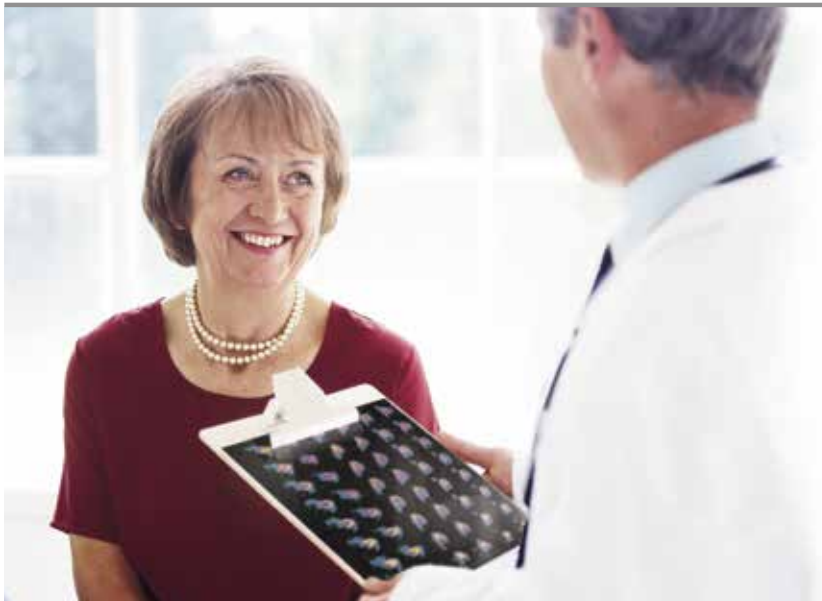

科多尼克推出了独特的 DICOM 彩色相机，在过去十多年中始终立足于多媒体相机行业的先驱行列。我们是彩色相机行业的专业公司，在全球销售的装置已超过 30,000 台。我们的 Horizon 多媒体相机具有惊人的无边际彩色打印功能，将图像尺寸最大化并减少浪费。科多尼克专有的医学色彩匹配技术(MCM™)是一种先进的图像处理功能，能调整打印输出色彩使其与医用显示器的色彩准确匹配。这一过程纠正了图像打印和医用诊断工作站之间的色度、色饱和度和色彩强度之间的不同。使用者使用每个科多尼克相机中内置的MCM划分功能便可简单地确定屏幕的最佳匹配。



使用我们专有的医学色彩匹配技术 (MCM™) 功能，彩色打印始终与医用显示器始终一致。科多尼克彩色染料热升华技术的一致性、清晰度和色彩饱和度远高于热蜡打印机和喷墨式打印机。



ChromaVista 彩色白基胶片使用厚重而高亮度的高分子材质做片基，能防水，防撕裂。由于胶片上没有墨或色粉，图像不会模糊或沾染到手上或其他物品上。



半色调彩色


不同于纸质激光/喷墨打印机使用的密集点阵的半色调成像方式，彩色白基胶片采用和传统胶片一样的连续色调成像方式，每个像素都有1670万色，使图像层次更丰富，分辨率更高。

规格:

- 与 HORIZON 多媒体相机兼容
- 连续色调成像，每个像素有1670色
- 最小密度<0.10 OD，最大密度>2.500 OD (反射)
- 厚度约等于0.2 mm

可用尺寸:

- A (216mm x 279mm)
- A4 (210mm x 297mm)

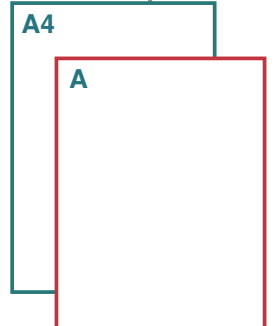

想获得更多信息，请联系科多尼克
021-62787701或访问www.codonics.cn

*请联系您的科多尼克代表获取型号配置和介质情况。DirectVisto胶片可用于大多数科多尼克打印机，有些有样式和尺寸限制。规格如有改变，恕不另行通知。版权©2020-2022科多尼克公司。



上海市长宁区仙霞路317号远东
国际大厦B栋1412室，邮编: 200051
电话: 021-62787701
传真: 021-62787719
电邮: info@codonics.com
网址: www.codonics.cn